

ROMÂNĂ

Citiți cu atenție toate instrucțiunile de utilizare înainte de a începe să utilizați acest dispozitiv medical.

- Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să vă adresați direct medicului dumneavoastră, terapeutului, farmacistului sau producătorului FROXIMUN AG.
- Acest dispozitiv medical este disponibil fără prescripție medicală și fără rețetă.

1. Ce este HAUTPUDER NC 100 și pentru ce este utilizat?

HAUTPUDER NC 100 pentru uz extern este un dispozitiv medical natural pentru susținerea vindecării rănilor în cazul leziunilor superficiale ale pielii sau al iritațiilor cutanate.

Domenii de utilizare:

- Adsorbția secrețiilor rănilor
- erupții cutanate supurante
- răni cutanate minore, superficiale sau excoriații minore (fără răni deschise)

2. Ce trebuie să luați în considerare înainte de a utiliza HAUTPUDER NC 100?

- Deschideți flaconul doar cu puțin timp înainte de utilizare.
- Asigurați-vă că recipientul este întotdeauna închis.
- Pudra pentru piele poate fi utilizată numai în scopul specificat în aceste instrucțiuni de utilizare.
- Nu presărați pudră în ochi, urechi sau nas.
- Nu inhalați pulberea.

HAUTPUDER NC 100 nu trebuie utilizat:

În caz de alergii sau hipersensibilitate cunoscută la ingredient. (a se vedea punctul 6: Ingrediente)

3. Cum trebuie utilizat HAUTPUDER NC 100?

- Presărați pudra pe zona corpului curățată anterior, în funcție de necesități.
- Se recomandă utilizarea zilnică repetată.
- Repetați aplicarea numai după ce ați curățat rana.
- Curățați zona tratată după cel mult 24 de ore.

Durata de utilizare

Aplicarea poate fi continuată până la vindecarea rănilor. Vă rugăm să consultați un medic sau un profesionist din domeniul sănătății dacă simptomele dumneavoastră nu se ameliorează.

Contramăsuri în caz de utilizare incorectă, supradozaj și efecte secundare:

- Nu sunt cunoscute supradoze.
- În caz de contact cu ochii, clătiți cu apă curată, consultați un medic dacă este necesar.

4. Ce efecte secundare sunt cunoscute?

Nu se cunosc efecte secundare.

Raportarea efectelor secundare

Dacă observați orice efecte secundare, vă rugăm să informați medicul,

terapeutul sau farmacistul. De asemenea, vă rugăm să raportați acest lucru către FROXIMUN AG folosind datele de contact de mai jos:

Producător și centru de raportare: FROXIMUN AG, Neue Straße 2a,
D - 38838 Schlanstedt

Telefon: +49 39401 632-0

Fax: +49 39401 632-199

E-mail: anwender@froximun.de

Persoana responsabilă (PRRC): +49 39401 632-320

5. Cum trebuie să fie depozitat HAUTPUDER NC 100?

- a nu se lăsa la îndemâna copiilor
- a se păstra într-un loc uscat între 5 °C - 40 °C
- a se proteja împotriva luminii soarelui
- utilizabil până la: a se vedea data ștanțată/imprimată pe marginea etichetei și pe cutia pliabilă

6. Informații suplimentare

Conținut și ingrediente

- Conținutul pachetului: 2 flacoane cu 4 g pulbere, instrucțiuni de utilizare în interiorul etichetei
- Ingredient: MANC® (zeolit clinoptilolit natural)

Informații privind MANC®:

- 100 % natural, fără gluten, fără lactoză
- MANC® este un aluminosilicat modificat.
- cușer, halal: Prin prezenta confirmăm că MANC® este fabricat printr-un proces cu utilizarea de materii prime minerale. Produsul nu conține ingrediente de origine animală, sânge sau subproduse ale acestuia sau alcool.

7. Informații despre producător

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germania

Telefon: +49 39401 632-0, fax: +49 39401 632-199

E-mail: info@froximun.de

Aceste instrucțiuni de utilizare au fost revizuite ultima dată la: 2026-06-04

ROMÂNĂ


Avertizări și instrucțiuni de siguranță



Producător



Respectați instrucțiunile de
utilizare

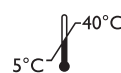

A se depozita între
5 °C - 40 °C



LOT,
numărul lotului



A se depozita într-un
loc uscat



A nu se lăsa la
îndemâna copiilor



Poate fi utilizat
până la



A se proteja împotriva luminii
soarelui



Dispozitiv medical